





Documentação do Aplicativo - Telas Iniciais




⇒ T1 - Launch Screen

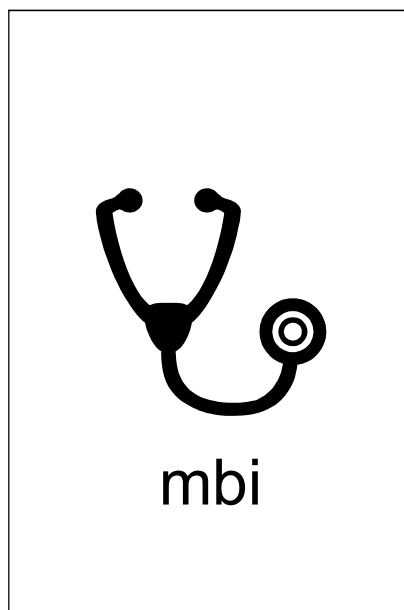








⇒ T2 - Lista de Pacientes

Pacientes 🔍 +		
Beltrano Souza		
Fulano Silva		
Paciente X		
Siclano Pereira		
 PACIENTES	 EXAMES	 OPÇÕES

⇒ T3 - Seleção do exame

Exames +		
Fulano Silva LD01 - Lado Direito 200 KHz 19/02/17 14:20		
Beltrano Souza BE01 - Braço Esquerdo 200 KHz 16/02/17 17:15		
Siclano Pereira LE01 - Lado Esquerdo 200 KHz 14/02/17 11:45		
Paciente X BD01 - Braço Direito 200 KHz		
 PACIENTES	 EXAMES	 OPÇÕES

⇒ T4 - Lista de Opções




Opções		
 Dispositivos mbi		
 Serviço de Nuvem		
 Relatórios		
 Enviar Feedback		
 PACIENTES	 EXAMES	 OPÇÕES

Documentação do Aplicativo - Segmento "Paciente" (s/ ações)

⇒ T2 - Lista de Pacientes


Pacientes 🔍 +


Beltrano Souza
Fulano Silva
Paciente X
Siclano Pereira

 PACIENTES  EXAMES  OPÇÕES

⇒ T2.1 - Novo Paciente


Novo Paciente ✕ ✓


**Prontuário**
Primeiro Nome _____
Sobrenome _____
Documento RG _____

**Tipo Sanguíneo**
Gênero _____
Etnia _____

⇒ T2.2 - Detalhes de Paciente


< Paciente X 📋 ✎


**Prontuário**
123456789
Nome Completo
Paciente Beta X
Data de nascimento
01/01/1991

**Tipo Sanguíneo**
O+
Gênero
Masculino
Etnia
Caucasiano
Grupos de Risco
Diabetes, Pres...

⇒ T2.3 - Edição de Paciente

Paciente X ✕ ✓

**Prontuário**
123456789
Primeiro Nome
Paciente
Sobrenome
Beta X
Documento RG
8765432-1

**Tipo Sanguíneo**
O+
Gênero
Masculino
Etnia
Caucasiano

Histórico de Exames
⇒ T2.4 - chamada: botão "histórico"

< Paciente X +

BE02 - Antebraço Esq. 200 KHz
19/02/17 14:22

BE01 - Braço Esquerdo 200 KHz
19/02/17 14:17


BD02 - Antebraço dir. 200 KHz
19/02/17 14:12


BD01 - Braço Direito 200 KHz
19/02/17 14:08


⇒ T2.5 - Detalhes de um exame


< Paciente X 📶 ↺


BE02 - Antebraço Esq.

 **Água** XX %

 **Gordura** XX %

 **Massa Muscular** XX %

 **TMB** XX Kcal

 **IMC** XX Kcal

Simplif. Comum Avançado

Configurar
⇒ T2.6 - Comparação


< Comparar ✓

BE02 - Antebraço Esq.

Características:
☒ Água ☐ Glic
☒ Gordura ☐ TMB
☐ M. Muscular ☐ IMC
☐ Peso seco ☒ Densi

Parâmetros:
☒ Grupo de Risco 1 ☐ Etni
☐ Medic. Const. ☐ Idad
☒ Tipo Sanguíneo ☐ Etc.

Exibição da comparação
baseada em parâmetros
⇒ T2.7 -

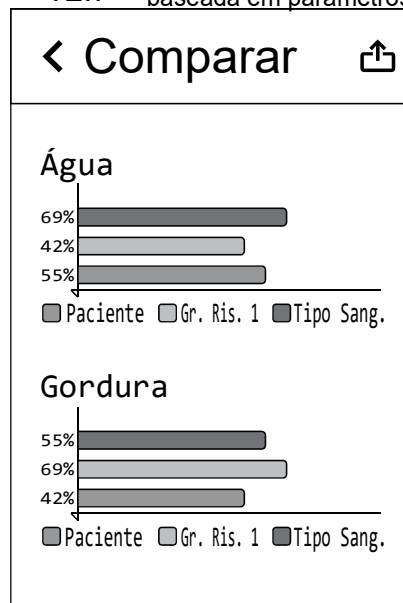

⇒ T2.8 - Configurar Exportação

< Exportar

Dados:
☒ Água ☐ Glic
☒ Gordura ☐ TMB
☐ M. Muscular ☐ IMC
☐ Peso seco ☒ Densi

Arquivo PDF

Enviar por e-mail

Imprimir

Documentação do Aplicativo - Segmento "Paciente" (c/ ações)

⇒ T2 - Lista de Pacientes

Pacientes 🔍 ^{T2.1} +

Beltrano Souza
Fulano Silva
Paciente X
Siclano Pereira ^{T2.2}

Barra de rolagem vertical, visível quando em uso

PACIENTES EXAMES OPÇÕES

⇒ T2.1 - Novo Paciente

Novo Paciente ^{T2} X ^{T2.2} ✓

Prontuário

Primeiro Nome

Sobrenome

Documento RG

Tipo Sanguíneo

Gênero

Etnia

⇒ T2.2 - Detalhes de Paciente

< Paciente X ^{T2} ^{T2.4} ^{T2.3}

Prontuário

123456789

Nome Completo

Paciente Beta X

Data de nascimento

01/01/1991

Tipo Sanguíneo

O+

Gênero

Masculino

Etnia

Caucasiano

Grupos de Risco

Diabetes, Pres...

⇒ T2.3 - Edição de Paciente

Paciente X ^{T2.2} X ^{T2.2} ✓

Prontuário

123456789

Primeiro Nome

Paciente

Sobrenome

Beta X

Documento RG

8765432-1

Tipo Sanguíneo

O+

Gênero

Masculino

Etnia

Caucasiano

⇒ T2.4 - Histórico de Exames

< Paciente X ^{T2.2} ^{T2.8} +

BE02 - Antebraço Esq. ^{T2.5} 200 KHz

19/02/17 14:22

BE01 - Braço Esquerdo 200 KHz

19/02/17 14:17

BD02 - Antebraço dir. 200 KHz

19/02/17 14:12

BD01 - Braço Direito 200 KHz

19/02/17 14:08

⇒ T2.5 - Detalhes de um exame

< Paciente X ^{T2.8} ^{T2.6}

BE02 - Antebraço Esq.

Água XX %

Gordura XX %

Massa Muscular XX %

TMB XX Kcal

IMC XX Kcal

Simplif. Comum Avançado

Configurar
⇒ T2.6 - Comparação

< ^{T2.5} Comparar ^{T2.7} ✓

BE02 - Antebraço Esq.

Características:

☒ Água ☐ Glic

☒ Gordura ☐ TMB

☐ M. Muscular ☐ IMC

☐ Peso seco ☒ Densi

Barra de rolagem horizontal, visível quando em uso

Parâmetros:

☒ Grupo de Risco 1 ☐ Etni

☐ Medic. Const. ☐ Idad

☒ Tipo Sanguíneo ☐ Etc.

Exibição da comparação
baseada em parâmetros
⇒ T2.7 -

< ^{T2.6} Comparar ^{T2.8}

Água

69% 42% 55%

Paciente Gr. Ris. 1 Tipo Sang.

Gordura

55% 69% 42%

Paciente Gr. Ris. 1 Tipo Sang.

NOTA: Consultar documentação para outras exibições

⇒ T2.8 - Configurar Exportação

< Exportar

NOTA: Tela genérica de exportação de dados

Dados:

☒ Água ☐ Glic

☒ Gordura ☐ TMB

☐ M. Muscular ☐ IMC

☐ Peso seco ☒ Densi

Arquivo PDF

Enviar por e-mail

Imprimir

Documentação do Aplicativo - Segmento "Exame" (s/ ações)

⇒ T3 - Novo Exame

Exames	+	
Fulano Silva LD01 - Lado Direito 200 KHz 19/02/17 14:20		
Beltrano Souza BE01 - Braço Esquerdo 200 KHz 16/02/17 17:15		
Siclano Pereira LE01 - Lado Esquerdo 200 KHz 14/02/17 11:45		
Paciente X BD01 - Braço Direito 200 KHz		
PACIENTES	EXAMES	OPÇÕES

⇒ T3.1 - Escolher Paciente

X Pacientes	Q	+
Beltrano Souza		
Fulano Silva		
Paciente X		
Siclano Pereira		

⇒ T3.2 - Info. Dinâmicas

< Paciente X	>	
	Peso *	
	Altura *	
	Atividade Física * CASUAL	
	Pressão Arterial	
	SpO2	
	Temperatura Corp.	
* obrigatórios		
PACIENTES	EXAMES	OPÇÕES

⇒ T3.3 - Definição do Exame

< Paciente X	Q	
PERSONALIZADO		
DIGITE UM CÓDIGO		
OK		
PACIENTES	EXAMES	OPÇÕES

⇒ T3.4 - Destaque do exame

< Paciente X	Q	
PERSONALIZADO		
LD01		
OK		
PACIENTES	EXAMES	OPÇÕES

⇒ T3.5 - Buscando mbi

< Paciente X	Q
Personalizado: LD01	
BUSCANDO...	
* MBI-01-MDA1	
* MBI-02-MDA4	

⇒ T3.6 - Configurando mbi

< Paciente X	Q
Personalizado: LD01	
MBI-01-MDA1	
78% 96%	
Pares de Eletrodos:	
1 2 3 4	
Verifique se todos os eletrodos estão firmemente conectados.	
INICIAR EXAME	

⇒ T3.7 - Realizando Análise

Paciente X	Q
Personalizado: LD01	
ANALISANDO	

⇒ T3.8 - Análise Concluída

Paciente X	Q
Personalizado: LD01	
CONCLUÍDO	
R/h: 1,68 Ω	
Xc/h: i0,37 Ω	
ϕ : 12,42°	
T: 19,77°C	
NOVO EXAME	
VER RESULTADOS	

Documentação do Aplicativo - Segmento "Exame" (c/ ações)

⇒ T3 - Novo Exame



Exames **+**

Fulano Silva
LD01 - Lado Direito 200 KHz
19/02/17 14:20


Beltrano Souza
BE01 - Braço Esquerdo 200 KHz
16/02/17 17:15

Siclano Pereira
LE01 - Lado Esquerdo 200 KHz
14/02/17 11:45

Paciente X
BD01 - Braço Direito 200 KHz


 **PACIENTES**  **EXAMES**  **OPÇÕES**

⇒ T3.1 - Escolher Paciente




X Pacientes 

Beltrano Souza



Fulano Silva

Paciente X 

Siclano Pereira

 **PACIENTES**  **EXAMES**  **OPÇÕES**

⇒ T3.2 - Info. Dinâmicas

 **< Paciente X** 

Peso *

Altura *




Atividade Física *
CASUAL

Pressão Arterial



SpO2


Temperatura Corp.


*** obrigatórios**

 **PACIENTES**  **EXAMES**  **OPÇÕES**


⇒ T3.3 - Definição do Segmento




 **< Paciente X** 

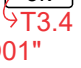PERSONALIZADO 

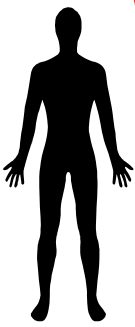

DIGITE UM CÓDIGO 


"LD01"





 **PACIENTES**  **EXAMES**  **OPÇÕES**


⇒ T3.4 - Destaque do Segmento

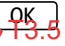


 **< Paciente X** 

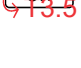PERSONALIZADO 

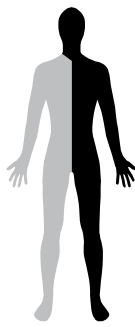
LD01 

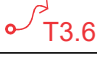



 **PACIENTES**  **EXAMES**  **OPÇÕES**


⇒ T3.5 - Buscando mbi




 **< Paciente X**

Personalizado: LD01


BUSCANDO...

MBI-01-MDA1

MBI-02-MDA4 

 **PACIENTES**  **EXAMES**  **OPÇÕES**

⇒ T3.6 - Configurando mbi

 **< Paciente X**


Personalizado: LD01

MBI-01-MDA1

78% **96%**

Pares de Eletrodos:
☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4

Verifique se todos os eletrodos estão firmemente conectados.

INICIAR EXAME 

⇒ T3.7 - Realizando Análise

Paciente X
Personalizado: LD01




ANALISANDO

"Tempo de Análise" 


⇒ T3.8 - Análise Concluída


Paciente X
Personalizado: LD01

CONCLUÍDO

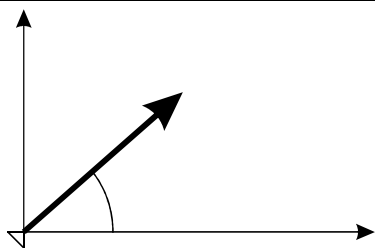








R/h: 1,68 Ω
Xc/h: i0,37Ω
φ: 12,42°
T: 19,77°C

NOVO EXAME 






VER RESULTADOS 

Documentação do Aplicativo - Segmento "Opções" (s/ ações)







⇒ T4 - Opções

Opções		
 Dispositivos mbi		
 Serviço de Nuvem		
 Relatórios		
 Enviar Feedback		
 PACIENTES	 EXAMES	 OPÇÕES




⇒ T4.1 - Dispositivos mbi
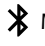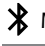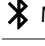
< Dispositivos mbi +		
MBI-01-MDA1  68%		
MBI-01-MDA4  97%		
 PACIENTES	 EXAMES	 OPÇÕES




⇒ T4.2 - Adicionar mbi

< Adicionar mbi		
BUSCANDO...		
 MBI-01-MDA1		
 MBI-02-MDA4		
 MBI-03-MDA6		
 PACIENTES	 EXAMES	 OPÇÕES




⇒ T4.3 - Configurar mbi

< MBI-01-MDA1		
Ajustar Hora/Data		
Calibração		
<div>DESCONECTAR</div>		
 PACIENTES	 EXAMES	 OPÇÕES




⇒ T4.4 - Pareando uma mbi

< MBI-03-MDA6		
Digite o código de pareamento mostrado no dispositivo: <div>601512</div>		
<div>PAREAR</div>		
 PACIENTES	 EXAMES	 OPÇÕES




⇒ T4.5 - Serviço de Nuvem

< Serviço de Nuvem		
José da Silva josesilva@email.com.br		
Pacientes compartilhados		
Relatório de uso		
 PACIENTES	 EXAMES	 OPÇÕES

⇒ T4.6 - Relatórios








< Relatórios		
Modificar cabeçalho		
Modificar assinatura		
Adicionar logomarca		
Configurar impressora		
 PACIENTES	 EXAMES	 OPÇÕES

⇒ T4.7 - Enviar Feedback






< Enviar Feedback >		
De: josesilva@email.com.br		
Escreva seu feedback		
<input checked="" type="checkbox"/> Incluir captura de tela e registros		
 PACIENTES	 EXAMES	 OPÇÕES

Documentação do Aplicativo - Segmento "Opções" (s/ ações)







⇒ T4 - Opções

Opções		
	Dispositivos mbi	↗ T4.1
	Serviço de Nuvem	↗ T4.5
	Relatórios	↗ T4.6
	Enviar Feedback	↗ T4.7
	PACIENTES	
	EXAMES	
	OPÇÕES	




⇒ T4.1 - Dispositivos mbi

↗ T4 ↖		< Dispositivos mbi +	↗ T4.2 ↖
MBI-01-MDA1		 68%	
MBI-01-MDA4		 97%	
	PACIENTES		EXAMES
	OPÇÕES		




⇒ T4.2 - Adicionar mbi

↗ T4.1 ↖		< Adicionar mbi
BUSCANDO...		
	MBI-01-MDA1	
	MBI-02-MDA4	
	MBI-03-MDA6 ↗ T4.4 ↖	
	PACIENTES	
	OPÇÕES	




⇒ T4.3 - Configurar mbi

↗ T4.1 ↖			< MBI-01-MDA1
Ajustar Hora/Data			
Calibração			
DESCONECTAR			
	PACIENTES		EXAMES
	OPÇÕES		




⇒ T4.4 - Pareando uma mbi

↗ T4.2 ↖			< MBI-03-MDA6
Digite o código de pareamento mostrado no dispositivo:			
601512 ↗ valor digitado pelo usuário ↖			
PAREAR			
	PACIENTES		EXAMES
	OPÇÕES		




⇒ T4.5 - Serviço de Nuvem

↗ T4 ↖			< Serviço de Nuvem
José da Silva			josesilva@email.com.br
Pacientes compartilhados			
Relatório de uso			
	PACIENTES		EXAMES
	OPÇÕES		

⇒ T4.6 - Relatórios

↗ T4 ↖			< Relatórios
Modificar cabeçalho			
Modificar assinatura			
Adicionar logomarca			
Configurar impressora			
	PACIENTES		EXAMES
	OPÇÕES		

⇒ T4.7 - Enviar Feedback

↗ T4 ↖			< Enviar Feedback >
De: josesilva@email.com.br			
Escreva seu feedback			
<input checked="" type="checkbox"/> Incluir captura de tela e registros			
	PACIENTES		EXAMES
	OPÇÕES		