

Documentação do Aplicativo - Telas Iniciais

⇒ T1 - Launch Screen



⇒ T2 - Lista de Pacientes

Pacientes 🔍 +		
F	Fulano Silva	
B	Beltrano Souza	
S	Siclano Pereira	
P	Paciente X	
<div><div></div>PACIENTES</div> <div><div></div>EXAME</div> <div><div></div>OPÇÕES</div>		

⇒ T3 - Seleção do exame

Novo Exame		
PERSONALIZADO ▼		
DIGITE UM CÓDIGO		OK
<div><div></div>PACIENTES</div>	<div><div></div>EXAME</div>	<div><div></div>OPÇÕES</div>

⇒ T4 - Lista de Opções

Opções		
Configurar mbi		
Configurar Nuvem		
Configurar Cores		
Relatórios		
Enviar Feedback		
<div><div></div>PACIENTES</div>	<div><div></div>EXAME</div>	<div><div></div>OPÇÕES</div>

Documentação do Aplicativo - Segmento "Paciente" (s/ ações)

⇒ T2 - Lista de Pacientes

Pacientes 🔍 +

F

 Fulano Silva

B

 Beltrano Souza

S

 Siclano Pereira

P

 Paciente X

PACIENTES

EXAME

OPÇÕES

⇒ T2.1 - Novo Paciente

Novo Paciente ✕ ✓

Prontuário

Primeiro Nome

Sobrenome

Documento RG

Tipo Sanguíneo

Peso

Altura

⇒ T2.2 - Detalhes de Paciente

< Paciente X 🏠 ✎

Prontuário

123456789

Nome Completo

Paciente Beta X

Data de nascimento

01/01/1991

Tipo Sanguíneo

O+

Peso

75 Kg

Altura

1,79 m

IMC

23,4 (Normal)

⇒ T2.3 - Edição de Paciente

Paciente X ✕ ✓

Prontuário

123456789

Primeiro Nome

Paciente

Sobrenome

Beta X

Documento RG

8765432-1

Tipo Sanguíneo

O+

Peso

75

Altura

1,79

Histórico de Exames

⇒ T2.4 - chamada: botão "histórico"

< Paciente X 📁

BE02

 Antebraço Esq.
19/02/17 14:22 200 KHz

BE01

 Braço Esq. Total
19/02/17 14:17 200 KHz

BD02

 Antebraço Dir.
19/02/17 14:12 200 KHz

BD01

 Braço Dir. Total
19/02/17 14:08 200 KHz

⇒ T2.5 - Detalhes de um exame

< Paciente X 📁 ↺

BE02 - Antebraço Esq.

Água

XX %

Gordura

XX %

Massa Muscular

XX %

TMB

XX Kcal

IMC

XX Kcal

Simplif.

Comum

Avançado

⇒ T2.6 - Configurar Comparação

< Comparar >

BE02 - Antebraço Esq.

Características:

☒ Água

☐ Glic

☒ Gordura

☐ TMB

☐ M. Muscular

☐ IMC

☐ Peso seco

☒ Densi

Parâmetros:

☒ Grupo de Risco 1

☐ Etni

☐ Medic. Const.

☐ Idad

☒ Tipo Sanguíneo

☐ Etc.

⇒ T2.7 - Exibição da comparação baseada em parâmetros

< Comparar 📁

Água

69%

42%

55%

Paciente

Gr. Ris. 1

Tipo Sang.

Gordura

55%

69%

42%

Paciente

Gr. Ris. 1

Tipo Sang.

⇒ T2.8 - Configurar Exportação

< Exportar

Dados:

☒ Água

☐ Glic

☒ Gordura

☐ TMB

☐ M. Muscular

☐ IMC

☐ Peso seco

☒ Densi

Arquivo PDF

Enviar por e-mail

Imprimir

Documentação do Aplicativo - Segmento "Paciente" (c/ ações)

⇒ T2 - Lista de Pacientes

Pacientes 🔍 ^{T2.1}

F	Fulano Silva
B	Beltrano Souza
S	Siclano Pereira
P	Paciente X ^{T2.2}

Barra de rolagem vertical, visível quando em uso

PACIENTES

EXAME

OPÇÕES

⇒ T2.1 - Novo Paciente

Novo Paciente ^{T2} ^{T2.2}

Prontuário
Primeiro Nome
Sobrenome
Documento RG

Tipo Sanguíneo
Peso
Altura

⇒ T2.2 - Detalhes de Paciente

< Paciente X ^{T2} ^{T3} ^{T2.3}

Prontuário
123456789
Nome Completo
Paciente Beta X
Data de nascimento
01/01/1991

Tipo Sanguíneo
O+
Peso
75 Kg
Altura
1,79 m
IMC
23,4 (Normal)

⇒ T2.3 - Edição de Paciente

Paciente X ^{T2.2} ^{T2.2}

Prontuário
123456789
Primeiro Nome
Paciente
Sobrenome
Beta X
Documento RG
8765432-1

Tipo Sanguíneo
O+
Peso
75
Altura
1,79

Histórico de Exames
⇒ T2.4 - chamada: botão "histórico"

< Paciente X ^{T2.2} ^{T2.8}

BE02 Antebraço Esq. ^{T2.5}
19/02/17 14:22 200 KHz

BE01 Braço Esq. Total
19/02/17 14:17 200 KHz

BD02 Antebraço Dir.
19/02/17 14:12 200 KHz

BD01 Braço Dir. Total
19/02/17 14:08 200 KHz

⇒ T2.5 - Detalhes de um exame

< Paciente X ^{T2.8} ^{T2.6}

BE02 - Antebraço Esq.

Água XX %

Gordura XX %

Massa Muscular XX %

TMB XX Kcal

IMC XX Kcal

Simplif. Comum Avançado

Configurar
⇒ T2.6 - Comparação

< ^{T2.5} Comparar ^{T2.7}

BE02 - Antebraço Esq.

Características:

☒ Água ☐ Glic

☒ Gordura ☐ TMB

☐ M. Muscular ☐ IMC

☐ Peso seco ☒ Densi

Barra de rolagem horizontal, visível quando em uso


Parâmetros:

☒ Grupo de Risco 1 ☐ Etni

☐ Medic. Const. ☐ Idad

☒ Tipo Sanguíneo ☐ Etc.

Exibição da comparação
baseada em parâmetros
⇒ T2.7 -

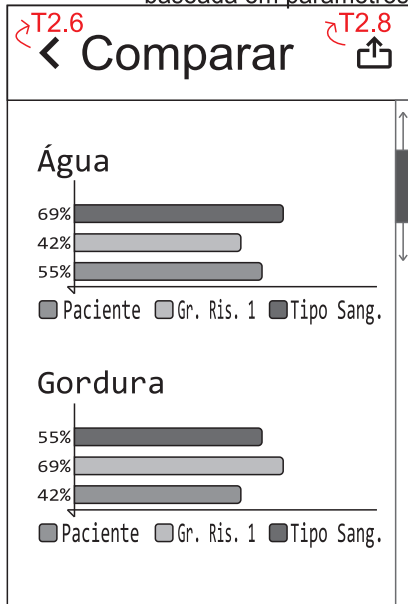

NOTA: Consultar documentação para outras exibições

⇒ T2.8 - Configurar Exportação

< Exportar

NOTA: Tela genérica de exportação de dados

Dados:

☒ Água ☐ Glic

☒ Gordura ☐ TMB

☐ M. Muscular ☐ IMC

☐ Peso seco ☒ Densi

Arquivo PDF

Enviar por e-mail


Imprimir

Documentação do Aplicativo - Segmento "Exame" (s/ ações)

⇒ T3 - Novo Exame

Novo Exame

ESCOLHER PACIENTE



PACIENTES

EXAME

OPÇÕES

⇒ T3.1 - Escolher Paciente

Pacientes

F

 Fulano Silva

B

 Beltrano Souza

S

 Siclano Pereira

P

 Paciente X

⇒ T3.2 - Definição do Exame

Paciente X

PERSONALIZADO 

DIGITE UM CÓDIGO

OK




PACIENTES

EXAME

OPÇÕES


⇒ T3.3 - Destaque do exame

Paciente X

PERSONALIZADO 

LD01

OK



AJUSTAR MBI

PACIENTES


EXAME


OPÇÕES


⇒ T3.4 - Buscando mbi

Paciente X

Personalizado: LD01

 BUSCANDO...



 MBI-01-MDA1

 MBI-02-MDA4

⇒ T3.5 - Configurando mbi

Paciente X

Personalizado: LD01

MBI-01-MDA1  78%  96%

Pares de Eletrodos:

☐

 1

☒

 2

Status dos Eletrodos:

S1: OK

S2: OK

S3: X

S4: X


Verifique se todos os eletrodos estão firmemente conectados

INICIAR EXAME

⇒ T3.6 - Realizando Análise

Paciente X

Personalizado: LD01




ANALISANDO

⇒ T3.7 - Análise Concluída

Paciente X

Personalizado: LD01



CONCLUÍDO

NOVO EXAME


VER RESULTADOS

Documentação do Aplicativo - Segmento "Exame" (c/ ações)

⇒ T3 - Novo Exame

Novo Exame

ESCOLHER PACIENTE





PACIENTES

EXAME

OPÇÕES

⇒ T3.1 - Escolher Paciente

Pacientes

F

 Fulano Silva

B

 Beltrano Souza

S

 Siclano Pereira

P

 Paciente X

PACIENTES

EXAME

OPÇÕES


⇒ T3.2 - Definição do Exame

Paciente X

PERSONALIZADO

DIGITE UM CÓDIGO

OK



PACIENTES

EXAME

OPÇÕES


⇒ T3.3 - Destaque do exame

Paciente X

PERSONALIZADO

LD01

OK



AJUSTAR MBI

PACIENTES

EXAME


OPÇÕES


⇒ T3.4 - Buscando mbi

Paciente X

Personalizado: LD01

BUSCANDO...

 MBI-01-MDA1

 MBI-02-MDA4

PACIENTES

EXAME

OPÇÕES

⇒ T3.5 - Configurando mbi

Paciente X

Personalizado: LD01

MBI-01-MDA1

78%

96%

Pares de Eletrodos:

1

2

Status dos Eletrodos:

S1: OK S2: OK

S3: X S4: X

Verifique se todos os eletrodos estão firmemente conectados

INICIAR EXAME

PACIENTES

EXAME

OPÇÕES

⇒ T3.6 - Realizando Análise

Paciente X

Personalizado: LD01



ANALISANDO

"Tempo de Análise"

PACIENTES


EXAME

OPÇÕES

⇒ T3.7 - Análise Concluída

Paciente X

Personalizado: LD01



CONCLUÍDO

NOVO EXAME

VER RESULTADOS

PACIENTES

EXAME

OPÇÕES